

「IV型コラーゲン・7S」 検査内容変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、この度、標記項目につきましては Non-RIA 試薬の採用により、別メーカーが販売する CLEIA 法試薬に変更させていただきますので、取り急ぎご案内申し上げます。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程願申し上げます。

敬具

記

■対象項目/変更内容

●[3505] IV型コラーゲン・7S (総合検査案内未掲載)

変更内容	新	旧
検査項目名	IV型コラーゲン・7S《CLEIA》	IV型コラーゲン・7S
検査方法	CLEIA	RIA(二抗体法)
検体量/保存方法	血清 0.5mL / 冷蔵 [容器番号:01 番]	同左
基準値	4.4 ng/mL 以下	5.0 ng/mL 以下
所要日数	3~6 日	4~7 日
検査実施料/判断料	148 点/144 点(生化学的検査(I)判断料)	同左
報告下限	1.0 ng/mL 未満	2.0 ng/mL 未満
報告上限	1,200 ng/mL 以上	999,000 ng/mL 以上
報告桁数	小数 1 位、有効 3 桁	同左
検査委託先	株式会社 LSI メディエンス (→1)	同左

※新旧二法の相関は裏面をご確認ください。

■変更期日

●2020年12月29日(火)受付日分より


以上

IV型コラーゲン・7S《CLEIA》


Non-RIA 試薬の採用により、別メーカーが販売する CLEIA 法試薬に変更いたします。新法では検体処理能力が向上し、所要日数が短縮されます。なお、新旧二法の相関は良好ですが、基準値を測定試薬の添付文書記載値に変更いたします。

■新旧二法の相関

[全域]

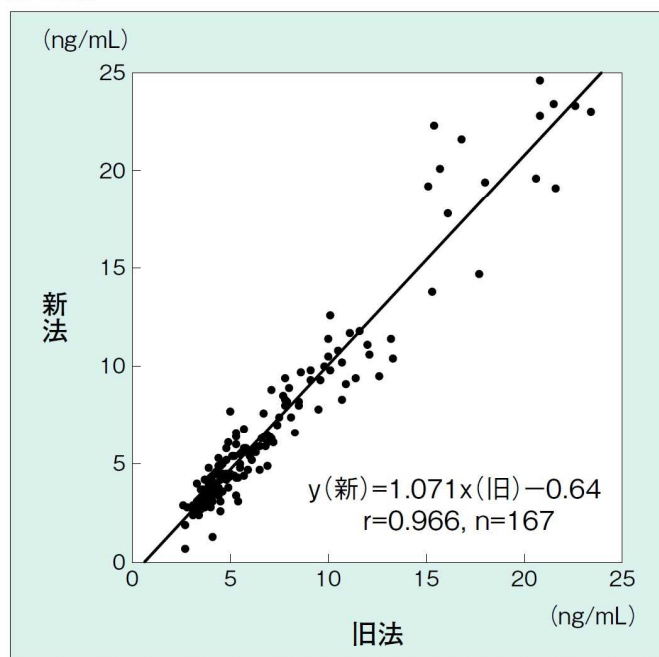

[低値域]

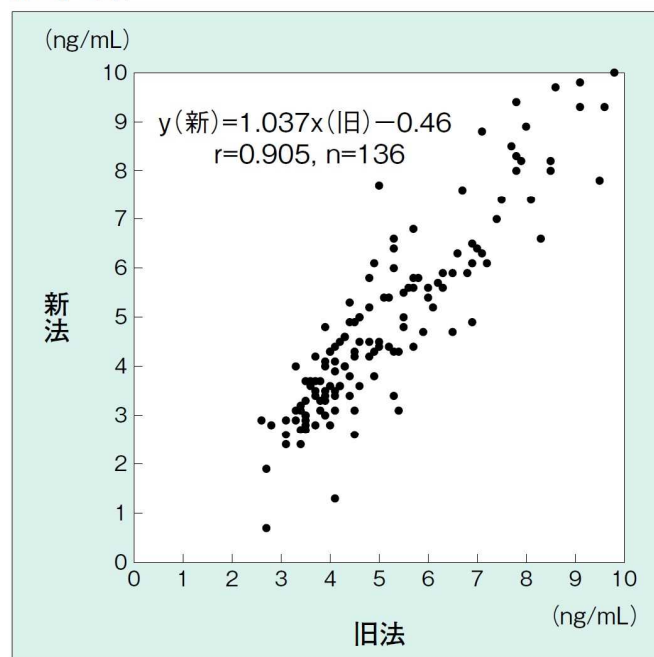

(LSI メディエンス検討データ)

■参考文献

大高木結媛, 他: 医学と薬学 77(5):785-792, 2020.