

「ヘリコバクター・ピロリ抗体」 検査内容変更の一部修正について

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、先般検査内容変更をご案内した標記項目につきまして、この度、変更内容を一部修正
させていただくことになりましたので、ご案内いたします。

誠に勝手ではございますが、事情をご賢察の上、何卒ご了承の程お願い申し上げます。

敬具

記

■対象項目/修正内容

頁	項目 コード	検査項目名	修正内容	修正後	修正前
77	3692	ヘリコバクター・ピロリ 抗体	項目コード	3692 のまま (項目コード変更を取り止め)	3692→3918 に変更

※ Information No.21-107a(本)※1、No.21-146a(本)※1 にてご案内した項目コードの変更を取り止めます。

※ この度の修正を踏まえた変更内容の詳細は裏面のご確認ください。

■変更期日

- 2021年9月30日(木)受付日分より

ヘリコバクター・ピロリ抗体

ヘリコバクター・ピロリ抗体につきまして、2021年9月30日受付日分からの検査内容変更にて項目コードの変更を含めてご案内しておりましたが、項目コードの変更を取り止めることとなりました。


また、所要日数は Information No.21-146a(本)※1 でご案内のとおり短縮されています。

その他の変更内容は先にご案内のとおりです。

■変更内容

変更内容	新	旧
項目コード	3918 3692 (項目コードの変更を取り止め)	3692
検査項目名	ヘリコバクター・ピロリ抗体:LA* ^{1,2}	ヘリコバクター・ピロリ抗体
測定試薬名/試薬販売元	H.ピロリ-ラテックス「生研」/デンカ(株)	LZテスト「栄研」H.ピロリ抗体/栄研化学(株)
検査方法	LA(ラテックス凝集比濁法)	同左
検体量/保存方法	血清 0.4mL / 冷蔵 [容器番号:01]	血清 0.3mL / 同左
基準値	陰性(-) (10 U/mL 未満)	同左
所要日数	3~5日 3~4日 (No.21-146a(本)※1 で案内済み)	3~4日
検査実施料/判断料	80点* ³ /144点(免疫学的検査判断料)	同左
報告下限	3 U/mL 未満	
報告上限	100 U/mL 以上	
報告桁数	整数、有効3桁	
備考	<p>*1: 除菌判定は、除菌終了後6カ月以降にご提出ください。</p> <p>*2: 除菌判定は除菌前後、同一試薬による抗体価比較を行い判断してください。同一試薬による抗体価比較が出来ない場合は他の検査法(尿素呼気試験や便中H.ピロリ抗原など)による除菌判定をご考慮ください。</p> <p>*3: ヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成12年10月31日保険発第180号)に即して行う必要があります。</p>	
検査委託先	株式会社 LSI メディエンス (→1)	同左

■新旧二法の相関

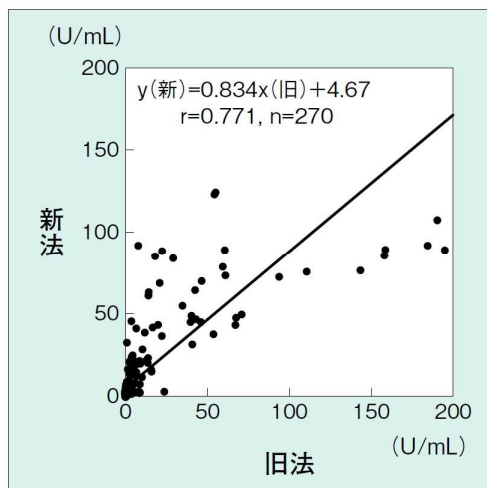

判定一致率

		旧法		計
		陽性 (+)	陰性 (-)	
新法	陽性 (+)	42	25	67
	陰性 (-)	1	202	203
計		43	227	270

陽性一致率: 97.7% (42/43)
陰性一致率: 89.0% (202/227)
判定一致率: 90.4% (244/270)

(LSI メディエンス検討データ)

■参考文献

伊藤公訓, 他: 日本ヘリコバクター学会誌 22(1): 51-57, 2020.

青山伸郎, 他: 日本ヘリコバクター学会誌 21(2): 112-120, 2020.